

Wirksamkeit

- ◆ trocknend
- ◆ reinigungsunterstützend



WL-Blow

Die Ausblasvorrichtung WL-Blow mit integriertem Luftmengenbegrenzer dient zum Ausblasen, Trocknen (mit Druckluft) und zur Reinigungsunterstützung nach der Anwendung von WL-clean/WL-cid** (Reinigung/Desinfektion) der Innenflächen von Hohlkörper- und Übertragungsinstrumenten. WL-Blow ist vorgesehen für die Anwendung im Aufbereitungsraum und kann an die vorhandene ölfreie Trockenluftanlage mit Bakterienfilter angeschlossen werden!

Anwendungsgebiet

Zum Entfernen von Reinigungs-, Desinfektions- und Pflegemittelrückständen in Hohlkörper- und Übertragungsinstrumenten.

Anwendung

siehe Seite 52



REF 4160 WL-Blow Set*



Efficacy

- ◆ drying
- ◆ supporting the cleaning



WL-Blow

The compressed air gun WL-Blow with integrated air flow limiter is used to blow out, to dry and to support the cleaning of hollow part instruments and transmission instruments after cleaning and disinfection with WL-clean/WL-cid**. WL-Blow is intended for use in the processing room and can be connected to the existing oil-free dry air compressor with bacterial filter!

Field of application

Removing of residues of cleaning and disinfection agents and maintenance products in hollow part instruments and transmission instruments.

Application

see page 52

* Für mehr Details fragen Sie Ihren Fachhändler
* For more details ask your dealer

** Bitte Herstellerfreigaben beachten!
** Please note manufacturer approvals!



WaterJet

Die Spülvorrichtung „WaterJet“ mit integriertem Wasserdruckbegrenzer dient zum Vorspülen und ist reinigungsunterstützend vor der weiteren Aufbereitung von Außen- und Innenflächen zahnärztlicher Übertragungsinstrumente und des allgemeinen Instrumentariums. Die Spülvorrichtung WaterJet ist für die Anwendung im Aufbereitungsraum konzipiert und kann an die vorhandene Trinkwasserleitung angeschlossen werden.

Anwendungsgebiet

Unterstützt das Entfernen organischer Rückstände an Außen- und Innenflächen von Medizinprodukten wie z. B. allgemeinem Instrumentarium oder zahnärztlichen Übertragungsinstrumenten.

Anwendung

Die Instrumente unmittelbar nach der Verwendung am Patienten im Aufbereitungsraum 3 x für 3 Sekunden innen durchspülen und außen abspülen, ggf. Vorgang wiederholen.

Anwendung nur durch Fachpersonal.



REF 4158 WaterJet*



WaterJet

The rinsing device „WaterJet“ with integrated water flow limiter is used to pre-rinse and facilitates the cleaning before the further treatment of outer and inner surfaces of dental transmission instruments and general instruments. The rinsing device “WaterJet” is designed for the use in the preparation room and can be connected to the drinking water line.

Field of application

Facilitates the removing of organic residues on outer and inner surfaces of medical devices such as general instruments or dental transmission instruments.

Application

Immediately after the treatment of the patient flush the inside of the used instruments 3 x for 3 seconds and rinse them outside, if necessary repeat the procedure.

Application only by qualified personnel.





WL-Adapter

Universaladapter für die WL-Serie:

WL-Adapter 01** (Kunststoff)

Universaladapter mit Lueranschluss, für Übertragungsinstrumente (ISO 9168) zum Ausblasen von Reinigungs- und Pflegemitteln (WL-clean, WL-cid, Pflegeöl) mit WL-dry/WL-Blow. Auch geeignet zum Ausblasen mittels Mehrfunktionsspritze und zum Einbringen der Reinigungslösung WL-clean mittels Lueranschluss z. B. in allgem. Hohlkörperinstrumenten.



REF 3521

Adapter für Spraywasser-/ Sprayluftkanäle:

WL-Adapter 02** (Edelstahl)


Adapter für Spraywasser- und Sprayluftkanäle aller **Hand- und Winkelstücke mit ISO-Schnittstelle.**



REF 3522

WL-Adapter 03** (Edelstahl)

Adapter für Spraywasser- und Sprayluftkanäle für **Turbinen mit „Sirona“-Schnittstelle.**

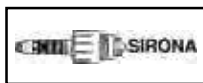

REF 3523

WL-Adapter 04** (Edelstahl)

Adapter für Spraywasser- und Sprayluftkanäle für **Turbinen mit „Multiflex“- (KaVo/SciCan) Schnittstelle.**



REF 3524

WL-Adapter 06** (Edelstahl)

Adapter für Spraywasser-/Sprayluftkanäle für **Turbinen mit „Roto-Quick“-Schnittstelle (W&H).**



REF 3526

WL-Adapter 07** (Kunststoff)

Adapter für die Langschaft-Winkelstücke nur für Spraywasser- und Sprayluftkanäle von **Sirona T1 Classic-Line.**



REF 3530



WL-Adapters

Universal adapters for the WL-series:

WL-Adapter 01** (plastics)

Universal adapter with Luer connector for transmission instruments (ISO 9168) for blowing-out of cleaning and maintenance products (WL-clean, WL-cid, maintenance oil) with WL-dry/WL-Blow. Also suitable for blowing out by using the multifunction syringe and to bring in the cleaning solution WL-clean via Luer connection e.g. into general hollow part instruments.

Adapters for spray water and spray air channels:

WL-Adapter 02** (stainless steel)

Adapter for spray water and spray air channels of all **contra-angles and hand pieces with ISO-interface.**

WL-Adapter 03** (stainless steel)

Adapter for spray water and spray air channels of **turbines with „Sirona“-interface.**

WL-Adapter 04** (stainless steel)

Adapter for spray water and spray air channels for **turbines with „Multiflex“- (KaVo/SciCan) interface.**

WL-Adapter 06** (stainless steel)

Adapter for spray water and spray air channels for **turbines with „Roto-Quick“-interface (W&H).**

WL-Adapter 07** (plastics)

Adapter for long shank contra-angles solely suitable for spray water and spray air channels of **Sirona T1 Classic-Line.**



WL-Adapter


Adapter für die gesamte Innenreinigung:

WL-Adapter 02/G** (Edelstahl)

Adapter für **Hand- und Winkelstücke mit ISO-Schnittstelle** wie Adapter 02, jedoch für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Instrumentenkopf.



REF 3532

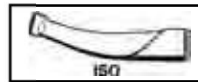


WL-Adapter 03/G** (Edelstahl)

Adapter für **Turbinen mit „Sirona“-Schnittstelle** wie Adapter 03, jedoch für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Turbinenkopf.



REF 3533

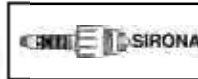


WL-Adapter 04/G** (Edelstahl)

Adapter für **Turbinen mit „Multiflex“- (KaVo/SciCan) Schnittstelle** wie Adapter 04, jedoch für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Turbinenkopf.



REF 3534

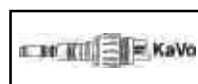


WL-Adapter 05/G** (Edelstahl)

Adapter für **Turbinen mit „Bien Air“-Schnittstelle** für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Turbinenkopf.



REF 3535

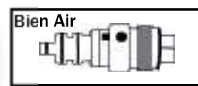

WL-Adapter 06/G** (Edelstahl)

Adapter für **Turbinen mit „Roto-Quick“-Schnittstelle (W&H)** wie Adapter 06, jedoch für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Instrumentenkopf.



REF 3536



WL-Adapter 09/G** (Edelstahl)

Adapter für **Turbinen mit „NSK“-Schnittstelle** für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Turbinenkopf.



REF 3539




WL-Adapter 10/G** (Edelstahl)

Adapter für **Turbinen mit „Morita“-Schnittstelle** für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Turbinenkopf.



REF 3561

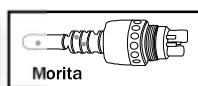


WL-Adapter 11/G* (Edelstahl)

Adapter für **ACTEON-AIR N GO Airpolisher „Supra/Perio-Düse“** für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Instrumentenkopf



REF 3563

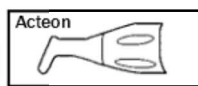

Adapter U-1 + U-1a Kombi* (Edelstahl)

Kombiadapter zum Reinigen und Desinfizieren mit der WL-Serie von außen gekühlten chirurgischen Hand- und Winkelstücken. Bestehend aus dem U-1 Spüladapter für Ultraschallspitzen und U-1a Schraubaufsatz für Steckschlauchanschluss., siehe auch Seite 29.



REF 3571



Adapter 1-U + U-1a Kombi* (stainless steel)

Combined adapter to clean and disinfect surgical contra-angles and hand pieces externally cooled with the WL-series. Consisting of the U-1 rinsing adapter for ultrasonic tips and U-1a screw attachment for hose plug connection. , see also page 29.

EinführungsSet mit 2 Adaptern

(Adapter 02/G, 04/G) inkl. 1 Set Ersatz-O-Ringe



REF 3541



WL-Adapters

Adapters for complete internal cleaning:

WL-Adapter 02/G** (stainless steel)

Adapter for **contra-angles and hand pieces with ISO-interface** like adapter 02 but for complete internal cleaning/disinfection incl. head of instrument.

WL-Adapter 03/G** (stainless steel)

Adapter for **turbines with „Sirona“ interface** like adapter 03 but for complete internal cleaning/disinfection incl. head of turbine.

WL-Adapter 04/G** (stainless steel)

Adapter for **turbines with „Multiflex“- (KaVo/SciCan) interface** like adapter 04 but for complete internal cleaning/disinfection incl. head of turbine.

WL-Adapter 05/G** (stainless steel)

Adapter for **turbines with „Bien Air“-interface** for complete internal cleaning/disinfection incl. head of turbine.

WL-Adapter 06/G** (stainless steel)

Adapter for **turbines with „Roto-Quick“-interface (W&H)** like adapter 06 but for complete internal cleaning with WL-clean/ WL-dry/ WL-Blow incl. head of turbine.

WL-Adapter 09/G** (stainless steel)

Adapter for **turbines with „NSK“-interface** for complete internal cleaning/disinfection incl. head of turbine.

WL-Adapter 10/G** (stainless steel)

Adapter for **turbines with „Morita“-interface** for complete internal cleaning/disinfection incl. head of turbine.

WL-Adapter 11/G** (stainless steel)

Adapter for **ACTEON-AIR N GO Airpolisher „Supra/Perio nozzle“** for complete internal cleaning/disinfection with WL-clean/WL-cid/ WL-dry/WL-Blow

Introductory set with 2 adapters

(adapter 02/G, 04/G) incl. 1 replacement set of o-rings



WL-Adapter

Adapter für Ultraschall und Aircalerspitzen

Adapter U-1 (Edelstahl)

Spüladapter für Ultraschallspitzen M 3 „Innengewinde“ von EMS, Mectron, KaVo, Komet.



REF 3570

Adapter U-2 (Edelstahl)

Spüladapter für Ultraschallspitzen M 3 „Außengewinde“ von EMS, Mectron, KaVo, Komet, NSK.



REF 3572

Adapter U-3 (Edelstahl)

Spüladapter für Ultraschallspitzen M 3/a „Innengewinde“ von Satelec, NSK.



REF 3573

Adapter U-4-S (Edelstahl)

Spüladapter für Ultraschallspitzen in der Piezochirurgie „Innengewinde“ von NSK (VarioSurg), Mectron (Piezosurgery).



REF 3574

Adapter U-5-S (Edelstahl)

Spüladapter für Ultraschallspitzen in der Ultraschallchirurgie „Außengewinde“ von Sirona (Siroprep und Siroimplant).



REF 3575



WL-Adapters

Adapters for ultrasonic and aircaler tips

Adapter U-1 (stainless steel),

rinsing adapter for ultrasonic tips M 3 “internal thread” from EMS, Mectron, KaVo, Komet

Adapter U-2 (stainless steel)

rinsing adapter for ultrasonic tips M 3 “external thread” from EMS, Mectron, KaVo, Komet, NSK

Adapter U-3 (stainless steel)

rinsing adapter for ultrasonic tips M 3/a “internal thread” from Satelec, NSK

Adapter U-4-S (stainless steel)

rinsing adapter for ultrasonic tips in the-Piezosurgery “internal thread” from NSK (VarioSurg), Mectron (Piezosurgery)

Adapter U-5-S (stainless steel)

rinsing adapter for ultrasonic tips in the ultra-sonic surgery “external thread” from Sirona (Siroprep and Siroimplant)

