


DEXIS Scan eXam™ One

Die schnelle, zuverlässige Kompaktlösung
für die digitale intraorale Bildgebung



Dental Excellence für jede Zahnarztpraxis

Scanner-Auflösung 17 lp/mm. Farbtiefe 16 Bit.

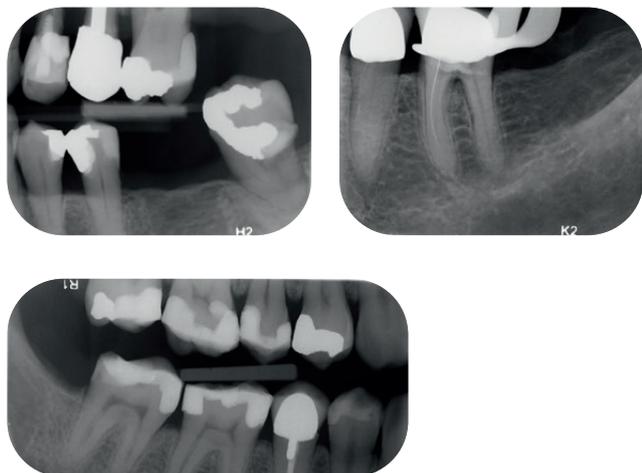

Optional: Okklusale 4C-Projektion.



Scan eXam One – perfekt für die intraorale Diagnostik



AUSGEZEICHNETE
BILDQUALITÄT



ERFÜLLT IHRE
DIAGNOSTISCHEN ANFORDERUNGEN



ERLAUBT OKKLUSALE
4C-PROJEKTIONEN



LIEFERT DAUERHAFT
HOCHQUALITATIVE ERGEBNISSE

Die moderne Lösung für intraorale Diagnose

Scan eXam One - eine Lösung für alle Anforderungen

Die hochentwickelte digitale Bildbearbeitung liefert dauerhaft verlässliche Aufnahmen. Durch optimierte Werkseinstellungen kann das Gerät sofort in Betrieb genommen werden.

Die Einstellungen können sehr einfach und jederzeit an die Präferenzen des Zahnarztes angepasst werden.



Digitalisierung, einfach gemacht

Ausgezeichnete Ergebnisse im Handumdrehen

Der DEXIS Scan eXam One liefert klare und scharfe Bildergebnisse mit akkurat dargestellten Graustufen. Die erforderlichen diagnostischen Informationen werden bis ins kleinste Detail abgebildet.



So flexibel wie ein Film – für hohen Patientenkomfort.



Einfache Bedienung von der Frontseite – sehr platzsparend.

Die passende Größe für Ihre Anforderungen.

Die verschiedenen Speicherfoliengrößen, die für den DEXIS Scan eXam One erhältlich sind, können für Bissflügel-, periapikale und okklusale Aufnahmen verwendet werden. So einfach und flexibel einsetzbar wie ein Film.

Größe 0

22 x 31 mm
734 x 1034 Pixel
1.08 MB

Größe 1

24 x 40 mm
800 x 1334 Pixel
1.53 MB

Größe 2

31 x 41 mm
1034 x 1368 Pixel
2.03 MB


Größe 3

27 x 54 mm
900 x 1800 Pixel
2.32. MB



Ihr Workflow

So einfach zu platzieren wie ein Film

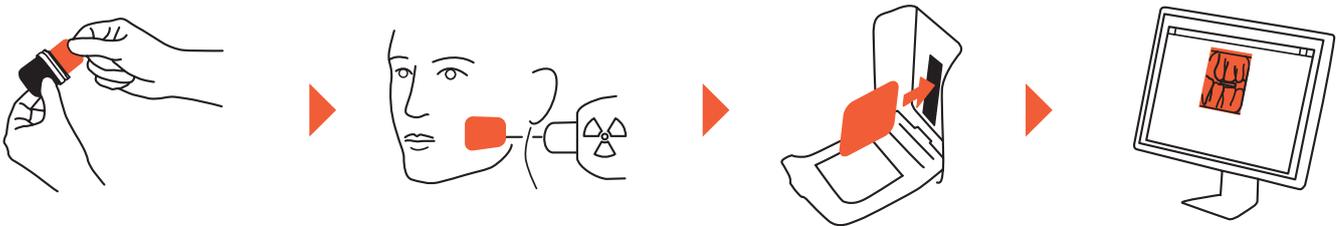

Einfacher und schneller Workflow.

Die flexiblen und wiederverwendbaren Speicherfolien ermöglichen einen einfachen und zügigen Workflow. Der gesamte Prozess vom Auslesen der Aufnahme bis zur Darstellung auf dem Bildschirm geht in Sekundenschnelle. Das System kann bei normalem Tageslicht bedient werden; es sind keinerlei Chemikalien notwendig.

Sicherer Workflow

Der DEXIS Scan eXam One bietet erhöhte Sicherheit im Workflow durch das Anzeigen des Patientennamens und der Aufnahmestationskennung im Display. Mit dem iDOT™ Markierungssystem können Sie zurückverfolgen, mit welcher Speicherfolie eine bestimmte Röntgenaufnahme gemacht wurde.



Eine Lösung für alle

Einzelplatz- oder Netzwerknutzung

Der DEXIS Scan eXam One ist die perfekte Wahl für Ihr persönliches Röntgenaufnahmen-Konzept am Behandlungsplatz. In einem Netzwerk können bis zu vier Anwender auf das System zugreifen.

Ansprechendes Design



Der DEXIS Scan eXam One ist äußerst platzsparend und sieht gut aus! Wählen Sie zwischen fünf trendigen Farben – eine davon wird perfekt in Ihre Praxis passen.



Technische Daten

Technologie	Wiederverwendbare Röntgenspeicherfolie
Pixelgröße	30 µm / 60 µm, wählbar
Scanner-Auflösung	17 lp/mm
Farbtiefe	16 bit
Verbindung	Standard-Netzwerkverbindung (Ethernet RJ45), DHCP
Abmessungen	168 mm x 233 mm x 328 mm
Gewicht	4 kg (8 lbs)
Betriebsspannung	100-240 VAC, 50/60 Hz
Betriebssystem	Windows 7, Windows 8.1 oder Windows 10

Abmessungen

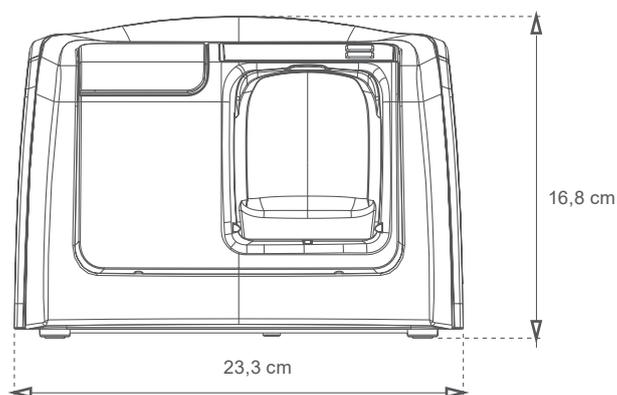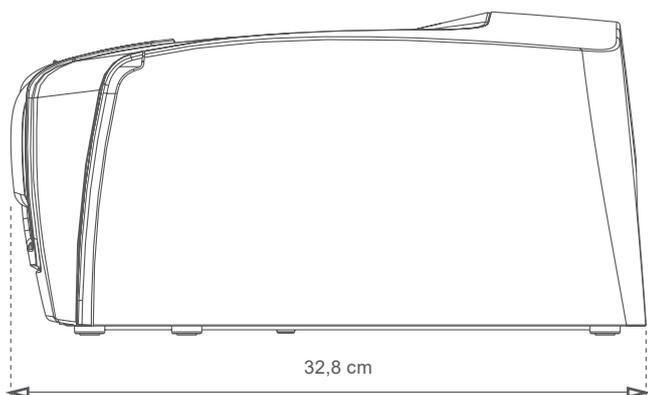

Wir helfen Zahnarztpraxen das Lächeln der Patienten zu verbessern

**DEXIS bietet zuverlässige und konsistente
Bildgebungslösungen für alle Praxen.
Unsere Produkte werden mit Blick auf die
Benutzerfreundlichkeit entwickelt und liefern
wichtige Informationen für Ihre präzise Diagnostik
und vorhersagbare Behandlungsplanung.**



PaloDEX Group Oy Nahkelantie 160, FI-04300 Tuusula, Finland