



# S·Max M

coMfortable Performance Series

LUFTTURBINEN



## SCHLANKES ERGONOMISCHES DESIGN UND UNERREICHTE SCHNEIDLEISTUNG

Unerreichte Schneidleistung, schlanker, ergonomisch gestalteter Körper und hervorragende Sichtverhältnisse. Die S-Max M Serie von NSK wurde ohne Kompromisse entwickelt. Erleben Sie es selbst.





# S-Max M

comfortable Performance Series  
LUFTTURBINEN

### Clean Head System



Das patentierte Clean-Head-System von NSK ist ein spezieller Mechanismus, der entwickelt wurde, um automatisch das Eindringen von Mundflüssigkeiten und anderen Verunreinigungen in den Handstückkopf zu verhindern und so die Lebensdauer der Kugellager zu verlängern.


### NSK "UP2" Druckknopf-Spannzange



Das neue Spannzangendesign von NSK garantiert hervorragenden Halt der Bohrer und Sicherheit des Patienten. Der Druckknopf-Kopfdeckel ermöglicht bequemes, einfaches Lösen des Bohrers.

### NSK "ISB" Integrierte Schaft-Kugellager

Im NSK ISB bildet der Schaft selbst die innere Lager-Laufläche. Vereinigung von Schaft und innerer Laufläche liefern höhere Steifigkeit, die Vibrationen reduziert sowie genaueres und gleichmäßigeres Schneiden garantiert.

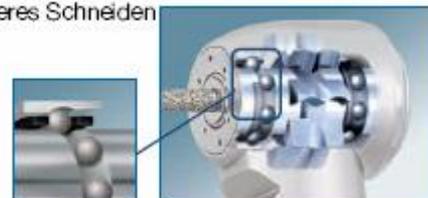

### Schlanke Design mit Edelstahlkörper

Der schlanke, ergonomisch gestaltete Instrumentenkörper gewährleistet hervorragende Sichtverhältnisse und bequemen Betrieb, wodurch Sie noch präziser und effektiver arbeiten können.



### Vierfach-Wasserspray & Zellglasoptik



Das Vierfach-Wasserspray von NSK kühlt wirkungsvoll das gesamte Arbeitsfeld, während der Zellglasoptik-Stab das Licht genau dorthin bringt, wo es benötigt wird.

### Patronenwechsel



Patronen können einfach in Ihrer Praxis ausgewechselt werden, was Ihnen hilft, Kosten und Ausfallzeiten besser zu kontrollieren. In der Ersatzpatrone sind die Sprayöffnungen integriert, um eine stets einwandfreie Funktion von Patrone und Wasserspray zu garantieren.



PTL-CL-LED

- Klarer
- Haltbar
- Sicherer

Mit einem einfachen Austausch Ihrer Kupplung durch eine NSK LED-Kupplung können Sie die neueste Technologie in Ihre Behandlung einführen und von einer unvergleichlichen Ausleuchtung profitieren.



## Anschluss an NSK-Kupplungen

### Miniatürkopf

Leistung: 16 W  
Drehzahl: 380.000–450.000 Min<sup>-1</sup>  
Kopfgröße: Ø 10,6 x H 12,5 mm



**Licht** MODELL: **M500L** Bestellnummer: **P1001**  
**Ohne Licht** MODELL: **M500** Bestellnummer: **P1003**

### Standardkopf

Leistung: 17 W  
Drehzahl: 360.000–430.000 Min<sup>-1</sup>  
Kopfgröße: Ø 12,1 x H 12,5 mm



**Licht** MODELL: **M600L** Bestellnummer: **P1002**  
**Ohne Licht** MODELL: **M600** Bestellnummer: **P1004**

**LED**



MODELL: **PTL-CL-LED** Bestellnummer: **P1001-600**



MODELL: **PTL-CL-LED III** Bestellnummer: **P1001-601**  
mit Einstellung Wasservolumen



# S-Max M Direktanschluss an KaVo® MULTiflex®

## Miniatürkopf

Leistung: 16 W  
Drehzahl: 380.000-450.000 Min<sup>-1</sup>  
Kopfgröße: Ø 10,6 x H 12,5 mm



**Licht** MODELL: **M500KL** Bestellnummer: **P1005**  
**Ohne Licht** MODELL: **M500K** Bestellnummer: **P1007**

## Standardkopf

Leistung: 17 W  
Drehzahl: 360.000-430.000 Min<sup>-1</sup>  
Kopfgröße: Ø 12,1 x H 12,5 mm



**Licht** MODELL: **M600KL** Bestellnummer: **P1006**  
**Ohne Licht** MODELL: **M600K** Bestellnummer: **P1008**

**LED**



MODELL: **KCL-LED** Bestellnummer: **P1005-600**  
Für KaVo® MULTiflex® LUX mit Einstellung Wasservolumen

Reinigung im Thermodesinfektor möglich Autoklavierbar bis zu 135 °C

KaVo® und MULTiflex® LUX sind eingetragene Warenzeichen von Kattenbach & Vogt GmbH & Co.



# Direktanschluss an Sirona® -, W&H® -, Bien-Air® - Kupplungen

**Miniatürkopf** Leistung: 16 W, Drehzahl: 380.000-450.000 Min<sup>-1</sup>, Kopfgröße: Ø 10,6 x H 12,5 mm  
**Standardkopf** Leistung: 17 W, Drehzahl: 360.000-430.000 Min<sup>-1</sup>, Kopfgröße: Ø 12,1 x H 13,5 mm



Miniatür: **Licht** MODELL: **M500SL** Bestellnummer: **P1009**  
Standard: **Licht** MODELL: **M600SL** Bestellnummer: **P1010**



Miniatür: **Licht** MODELL: **M500WL** Bestellnummer: **P1013**  
Standard: **Licht** MODELL: **M600WL** Bestellnummer: **P1014**



Miniatür: **Licht** MODELL: **M500BL** Bestellnummer: **P1011**  
Standard: **Licht** MODELL: **M600BL** Bestellnummer: **P1012**

Reinigung im Thermodesinfektor möglich Autoklavierbar bis zu 135 °C

Sirona® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Sirona Dental Systeme GmbH.  
W&H® ist ein eingetragenes Warenzeichen von W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.  
Bien-Air® und Unifix® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bien-Air Dental S.A.