

ULTRADENT

DENTAL UNITS. MADE IN GERMANY.



EASY KLASSE: INDIVIDUELL, FLEXIBEL, AUSDAUERND.

Ideale KFO-Behandlungsplätze – für noch
mehr Power und Potenzial.



INHALT

ULTRADENT präsentiert die easy Klasse	3
easy KFO 1	4/5
easy KFO 2	6/7
easy PROPHY	8/9
Variantenreiche Zusatzausstattung	10–12
Serienausstattung und Zusatzelemente	13

DREI KONZEPTE, DIE SIE BEI DER AUSSTATTUNG IHRER PRAXIS PERFEKT UNTERSTÜTZEN



easy KFO 1



easy KFO 2



easy PROPHY

Sehr verehrte Kieferorthopädin,
sehr geehrter Kieferorthopäde,

seit Jahren trägt ULTRADENT den intensiven Anforderungen der kieferorthopädischen Versorgung auf exzellente Art und Weise Rechnung: Mit den Modellen der **easy** Klasse setzen wir Standards in Flexibilität und Individualität.

Der hohe Anspruch der modernen KFO-Praxis ist uns vertraut. Was sollte Ihnen also näherliegen, als bei der Ausstattung oder Teilmodernisierung auf ULTRADENT zu setzen?

Rund 80 % Ihrer Eingriffe führen Sie an jungen Patienten aus. Annähernd so viele nimmt der Behandler alleine vor. Diese und weitere Vorgaben haben zur gezielten Entwicklung der ULTRADENT **easy** Klasse geführt.

Wir wissen, wie ganzheitlich, einfühlsam und komfortabel Sie behandeln. Uns ist bewusst, dass Sie sich größtmögliche Flexibilität und ergonomisches Arbeiten wünschen. Aus diesem Grund lassen wir Ihnen so gut wie alle Optionen offen. Holen Sie sich den Basisplatz heute – und statten Sie ihn sukzessive mit den Modulen Ihrer Wahl aus.

SIE HOLEN INSTRUMENTE AM LIEBSTEN VON DER LINKEN SEITE HERAN? EASY KFO 1 BIETET IHNEN KOMFORTABLES BEHANDELN

Sie behandeln meist in der 10- bis 14-Uhr-Position und nehmen die Instrumente bevorzugt von der linken Seite auf – dann ist der **easy KFO 1** die ideale Lösung für Sie. Die zentrale Bedieneinheit mit Instrumententräger ist an einem Mehrgelenksarm direkt an der Wassereinheit befestigt und lässt sich mühelos in Position bringen. Ihre Patienten – größtenteils junge, impulsive Menschen – genießen dadurch mehr Freiheit, wenn sie für die Behandlung Platz nehmen. Hängende Schläuche und mögliche Hindernisse gibt es beim **easy KFO 1** nicht. Das beugt eventuellen Beschädigungen vor und bietet ein komfortables, gutes Behandlungsgefühl.



Der **easy KFO 1** ist in folgender Ausführung dargestellt: Standardlackierung Reinweiß RAL 9010 mit Polsterfarbe Violett, 4003 T.



EASY KFO 1 – FÜR BEWEGUNGSFREIHEIT IN BISHER NICHT GEKANNTEM STIL


Bereits auf den ersten Blick zeigt der **easy KFO 1**, mit wie viel neuer Bewegungsfreiheit Sie behandeln können. Ihre Patienten haben viel Raum, um auf dem Stuhl Platz zu nehmen. Sie sitzen an idealer Position während der Behandlung: Kopf und Kiefer des Patienten liegen direkt vor Ihnen, so dass Sie ungehinderten Zugriff auf das gesamte Mundareal haben. Das zentrale KFO-Arztelement und der flexible Traytisch unterstützen Sie ergonomisch: Sie bleiben entspannt und konzentriert, auch bei längeren Behandlungen.

Extras der **easy** Klasse



Fußanlasser F 10

Der Fußanlasser ermöglicht es Ihnen, Patientenstuhl und Instrumente stufenlos zu steuern: mit höchstem Bedienkomfort und höchsten Ansprüchen an die medizinische Hygiene. Optional sind alle **easy** Modelle auch mit dem kabellosen Funk-Fußanlasser F 9 kombinierbar.

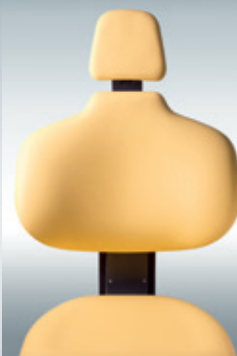

Liegekomfort

Den Patientenstuhl der **easy** Modelle können Sie mit schmaler oder breiter Rückenlehne bestellen. Unabhängig vom Format ist Ihren Patienten ein weicher Liegekomfort während der Behandlung sicher.

Traytisch U 650

Wir empfehlen, den **easy KFO 1** mit einem Traytisch auszurüsten. Durch die bodenmontierte Traysäule ist er sehr stabil und eine einstellbare Bremse sorgt für die sichere Fixierung der Wunschposition. Optional statten wir den Traytisch zusätzlich mit einem Zangenhalter, einem Abfallbehälter oder einem zusätzlichen Instrumenten-Ablageköcher links/rechts aus. So wird der Traytisch zu einem multifunktionalen, zusätzlichen Arbeitsbereich.

Zentrale Bedieneinheit

Das KFO-Arztelement bieten wir für Sie mit fünf Ablageköchern inklusive großem und kleinem Saugschlauch an. Das Bedienfeld mit Foliendisplay unterstützt optisch die komfortable Bedienung. Sämtliche Instrumentenfunktionen können Sie bequem und ohne Hygieneverlust mit dem Fußanlasser steuern.

**easy
KFO 1**

SIE GREIFEN INSTRUMENTE BEVORZUGT VON DER RECHTEN SEITE? EASY KFO 2 IST IHRE ERSTE WAHL

Ihre bevorzugte Arbeitsweise setzt den Maßstab. Die ULTRADENT Behandlungseinheit passt sich nahtlos an. Sie bevorzugen die Behandlung Ihrer Patienten aus seitlicher Richtung, sagen wir aus der 9- bis 12-Uhr-Position, und wünschen sich die Auswahl Ihrer Arzteinstrumente an der rechten Seite, dann ist der **easy KFO 2** die ideale Lösung. Die Instrumentenablage ist direkt an der stabilen, bodenmontierten Trayablage befestigt und lässt sich bei Bedarf ein- oder ausklappen. Die Instrumentenbestückung der bis zu fünf Köcher ist individuell wählbar. Sämtliche Funktionen können Sie bequem und ohne hygienische Risiken über den Fußanlasser steuern.



Der **easy KFO 2** ist in folgender Ausführung dargestellt: Standardlackierung Reinweiß RAL 9010 mit partieller Sonderlackierung Goldgelb RAL 1004; mit Polsterfarbe Zinkgelb, 1300 T.



EASY KFO 2 – UND DIE BEHANDLUNG WIRD ZUR MÜHELOSEN ÜBUNG

Ihre tägliche Verantwortung in der kieferorthopädischen Praxis ist hoch. ULTRADENT unterstützt Sie mit durchdachten Elementen, damit Ihr medizinischer Einsatz an diesem topmodernen Behandlungsplatz zur einfachen Übung wird. So passen sich Arzt- und Assistenzelement flexibel Ihren Bedürfnissen an – unabhängig davon, ob Sie 2- oder 4-händig arbeiten.

Extras der **easy** Klasse

Kopfstütze in zwei Varianten

Bei der **easy** Klasse gibt es ergonomisch geformte, magnetisch befestigte Kopfstützen in zwei Varianten:


Als U-Form-Kissen, das sich auch an Kinderköpfe anpasst und bei ganz kleinen Patienten im Bereich der Rückenlehne fixiert wird, um eine angenehme und kindgerechte Lagerung zu erzielen.

Als Kissen aus Memoryschaum, bei dem sich das Polster individuell an die Kopfform anpasst.

Überstreckte Behandlungsposition

Je nach kieferorthopädischer Maßnahme können Sie den Patienten in eine mehr oder weniger überstreckte Position bringen.

Selbst extreme Lagen von Kopf und Kiefer sind mit den Modellen der **easy** Klasse möglich. Bei fachärztlichen Leistungen wie der Lingualtechnik wird dies von Vorteil sein.

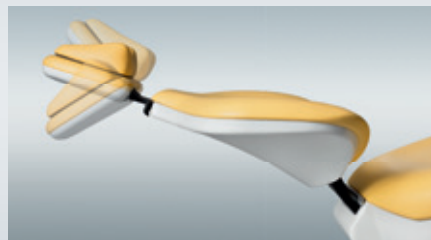

Modernes Zahnarzt- und Assistenzelement

Die am Traytisch angebrachte Instrumentenablage mit fünf Köchern ist je nach Bedarf ausklappbar. Das verbessert die Erreichbarkeit der Instrumente während der Behandlung und sorgt für eine ergonomisch schonende und kraftsparende Körperhaltung.

Das Assistenzelement ist direkt an der Wassereinheit montiert und mit drei Köchern ausgestattet, die ganz nach Wunsch bestückt werden können. Mit unserem Doppelgelenksarm können Sie das Helferinnenelement noch bequemer und einfacher in alle gewünschten Positionen bringen.

**easy
KFO 2**

SIE WÜNSCHEN SICH DIE SPEZIELLE PROPHYLAXE-EINHEIT? EASY PROPHY GIBT IHNEN EINE FÜLLE VON OPTIONEN

Sie bieten in Ihrer Praxis ein attraktives Prophylaxe-Ambiente und Ihre Patienten werden diese Vorsorge gerne und regelmäßig in Anspruch nehmen. Der **easy PROPHY** ist Ihre ideale Lösung. Die schlanke Form und sein geringer Platzbedarf machen ihn zur ersten Wahl auch für kleine Räume. Sein elegantes Design und die große Farbvielfalt bei Polstern und Lacken werten Ihre Praxis auf und tragen zur Entspannung der Patienten bei. Die Komplettausstattung des Zahnarztelementes beinhaltet sogar ein integriertes Prophylaxe Pulverstrahlgerät (zu sehen im runden Foto unten).



Der **easy PROPHY** ist in folgender Ausführung dargestellt: Standardlackierung Reinweiß RAL 9010 mit Polsterfarbe Apfelgrün, 5515 T.



EASY PROPHY – IHR PARTNER VOM BASIS-TRAINING BIS ZUR POWER-EINHEIT

Müheless können Sie den **easy PROPHY** von ULTRADENT in Ihre Behandlungsabläufe einbinden. Die konzeptionelle Grundausstattung ist für die Prophylaxe vorrangig auf 2-händiges Behandeln ausgelegt. Seine komplette Ausstattung macht den **easy PROPHY** zu einer stets leistungsfähigen Reserve, sollte in der Praxis kurzfristig ein zusätzlicher Behandlungsplatz benötigt werden. Das modulare und individuell erweiterbare Konzept lässt Ihnen für die Zukunft alle Möglichkeiten.

Extras der **easy Klasse**

Kompakter Micromotor & flexible Kombination der Instrumente

Der verschleißfreie und durchzugsstarke Lichtmicromotor bildet mit der Spritze die Basis am Zahnarztelement. Alle weiteren Instrumente werden durch Ihre individuellen Leistungsschwerpunkte bestimmt: z. B. ein piezokeramischer Zahnsteinentferner oder ein Airsonic-Anschluss.



Modernster Hygienestandard

Bei der **easy Klasse** ist effiziente Hygiene nach höchsten Standards serienmäßig enthalten. Dank Permanent- und Intensiventkeimung sowie RKI-Spülung haben Keime keine Chance.

Wartungsfreie und leistungsstarke LED Behandlungsleuchte

Die Solaris 2 ist hochwertig verarbeitet und lässt sich leicht und präzise positionieren. Abnehmbare und autoklavierbare Metallgriffe sorgen für perfekte Hygiene. Die Lichtintensität ist extrem hoch und regelbar von 3000 – 40000 Lux. Aufgrund minimaler Wärmeentwicklung wird kein störender Ventilator benötigt.



Mit modernstem Multimedia für die Zukunft gerüstet

Gerade bei Prophylaxe-Leistungen kommt es darauf an, Nutzen und Wert der Behandlung dem Patienten effektiv zu vermitteln. Wir machen diesen wichtigen Schritt in die Zukunft möglich. Zusammen mit dem **easy PROPHY** bieten wir optional ein Multimedia-Paket an. Es enthält neben dem hochauflösenden TFT-Flachbildschirm und der Intraoralkamera auch die Multimedia-Anschlussbox für Ihren PC: einfach anschließen und mit visuellen Darstellungsmöglichkeiten überzeugen.

**easy
PROPHY**

SIE HABEN BESONDERE ANFORDERUNGEN? DANN MACHEN WIR IHREN **EASY** NOCH PASSENDER FÜR SIE!

ULTRADENT hat das Anliegen, Ihnen für die anspruchsvollen und hoch entwickelten medizinischen Aufgaben Ihrer Praxis genau das Richtige zu bieten. Reichen Grundausstattung und Serienumfang von **easy KFO 1**, **easy KFO 2** und **easy PROPHY** dafür nicht aus, erfüllen wir gerne Ihre individuellen Sonderwünsche.

Grundsätzlich sind die drei **easy** Behandlungsplätze auf sämtliche Anforderungen der modernen Praxis ausgelegt. Aber Sie müssen Ihren **easy** keineswegs von der Stange kaufen. Ganz im Gegenteil: So einzigartig wie die Arbeitsabläufe in Ihrer Praxis, so individuell soll die Ausstattung Ihres **easy** sein.

EASY SPEZIAL

Kombination mit dem Hinterkopf-Behandlungs- system U 1300 HK

An Ihrem neuen **easy** Behandlungsplatz können Sie Patienten auf Wunsch auch mit einem Arztelement behandeln, das nicht ins Auge fällt. Unser leistungsfähiges Hinterkopf-Behandlungssystem U 1300 HK lässt sich unauffällig in einem Schrank oder unter einer Arbeitsfläche außerhalb des Gesichtsfelds installieren. Damit bleibt es für Ihre Patienten zunächst unsichtbar – und Sie können Kinder, Jugendliche und Angstpatienten wesentlich entspannter versorgen.



Auf Wunsch mit dem Patientenstuhl T 11 – für die **easy** Extraklasse



Wenn Sie Ihren Behandlungsraum mit unseren Hinterkopf-Geräten ausstatten, bietet Ihnen ULTRADENT den passenden Patientenstuhl T 11 dazu. Als Solostuhl benötigt er lediglich einen Stromanschluss und ist in kleinen Räumen die perfekte Lösung.

Eine Besonderheit des T 11 ist seine durchgehende Liegefläche, ohne Spalt zwischen Rückenlehne und Sitzfläche. Außerdem lässt sich seine Kopfstütze komplett entfernen und das Kissen magnetisch auf der Rückenlehne fixieren, so dass eine verkürzte Auflagefläche entsteht. Diese Position kommt Ihnen bei der Behandlung von Kindern besonders entgegen und ermöglicht sogar kleine operative Eingriffe. Eine breite Auflagefläche und die hochgezogenen Seitenteile der Rückenlehne geben zusätzliche Sicherheit bei der Patientenauflagerung.

LÖSUNGEN

Unsere Farbvielfalt bei Polster und Lacken: Schöpfen Sie aus dem Vollen!

Damit bei der optischen Gestaltung Ihrer **easy** Behandlungseinheit keine Wünsche offen bleiben, bietet ULTRADENT eine große Vielfalt an Polster- und Lackfarben zur Auswahl. Bei der Lackierung können Sie als Sonderausstattung wählen zwischen einer Komplettlackierung in allen RAL-Farben oder einer Teillackierung am Arzt- und Assistenzelement sowie an der Wassereinheit. Ein optisches Highlight, so oder so!

Testen Sie die unzähligen Kombinationsmöglichkeiten mit unserem Farbkonfigurator im Internet: www.ultradent.de/de/konfigurator/farbkonfigurator



Effiziente Lösung, zum Beispiel für den Abdruckraum

Ein Patientenplatz ausschließlich für das Erstellen von Abdrücken braucht keine große instrumententechnische Ausrüstung. Wenn Sie die effiziente Lösung für diesen Arbeitsbereich suchen, steht Ihnen das **easy** Modell Ihrer Wahl in puristischer Konfiguration nur mit Wassereinheit zur Verfügung. Sie investieren nicht mehr, als unbedingt nötig ist.



easy
KLASSE



easy Klasse mit Hinterkopf-Absaugsystem U 753

Ihren neuen **easy** können wir zusätzlich mit dem Hinterkopf-Absaugsystem ausrüsten. Es lässt sich komplett in einen Schrank oder unter die Arbeitsplatte im Hinterkopf-Bereich integrieren. Das spart unter Umständen den entscheidenden Platz in kleinen Räumen.

Bei 4-händigem Arbeiten kann es für praktische, großzügige Abläufe sorgen. Und auch für Patienten ist die zunächst unsichtbare Anordnung angenehm. Standardmäßig kommt das U 753 mit drei Ablageköchern sowie großem und kleinem Saugschlauch; weitere Instrumente sind möglich.

Empfohlene Grundausstattung easy Klasse:

KFO-Arztelement (easy KFO 1)

- > 3-Wegespritze
- > 1. Lichtmicromotor K 2
- > Fußanlasser F 10, stufenlos regelbar
- > Traytisch U 650, lackiert für 2 Normtrays, inkl. Traysäule

Zahnarztelement (easy KFO 2, easy PROPHY)

- > 3-Wegespritze
- > 1. Lichtmicromotor K 2
- > Fußanlasser F 10, stufenlos regelbar

Wassereinheit

- > KFO-Element mit Doppelgelenksarm (easy KFO 1)
- > Assistenzelement „Einsteiger“ (easy KFO 2, easy PROPHY)
- > Anbauträger, rund
- > Mundspülbeckenventil

Versorgungselement

- > DVGW Trennstrecke, Permanent-Intensiventkeimung

Anbauträger

Patientenstuhl UD 2015

- > Rückenlehne, breit
- > Kopfstütze „Alle“
- > Stuhlpolster, kurz

Behandlungsleuchte

- > Behandlungsleuchte „Solaris 2“, LED, gerätemontiert mit Trafo und Aufbauleuchte

SIE MÖCHTEN DIE AUSSTATTUNGSELEMENTE DER EASY KLASSE KENNEN LERNEN? HIER IST UNSER SPORTLICHES PROGRAMM FÜR SIE

Auswahl optionaler Ausstattungselemente easy Klasse:

Zahnarzt-/KFO-Element

- > 6-Wegespritze
- > Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Anschluss
- > Lichtmicromotor K 2
- > Zahnsteinentferner, piezokeramisch, mit LED
- > Integriertes Prophylaxe Pulverstrahlgerät
- > Röntgenbildbetrachter (easy KFO 2, easy PROPHY)
- > Fußanlasser F 9, kabellos, stufenlos regelbar

Wassereinheit

- > Lichtpolymerisation Mini-LED (Assistenzelement easy KFO 2, easy PROPHY)
- > 3-Wegespritze (Assistenzelement easy KFO 2, easy PROPHY)
- > 6-Wegespritze (Assistenzelement easy KFO 2, easy PROPHY)
- > Separierautomatik
- > Airsonic-Anschluss (ohne Gerät)

Versorgungseinheit

- > Interne Wasserversorgung mit Druckwasserflasche
- > Anschlussmöglichkeit Schnelkupplung, Wasser/Luft & Kältegerätesteckdose, 230 V

Behandlungsleuchte

- > Behandlungsleuchte „Solaris 2“, LED, 230 V, deckenmontiert mit Trafo

Patientenstuhl

- > Kopfstütze „Uni“, ausziehbar, zweifach schwenkbar
- > Kopfpolster Memoryschaum
- > Rückenlehne, schmal
- > Armlehne, rechts/links
- > Softpolster Patientenstuhl
- > Komfortpolster mit Echtleder

Traytisch

- > Zangenhalter
- > Zusätzlicher Ablageköcher, links oder rechts
- > Abfallbehälter

Multimedia

- > Multimedia-Paket 2011 (Monitor und Kamera)
- > Monitorpaket 2011 (Monitor)

Arbeitsstuhl

- > Arbeitsstuhl „Ei-UD“
- > Arbeitsstuhl „IRON“
- > Arbeitsstuhl „Pluto“

Sonderlack



**Weitere Behandlungseinheiten finden Sie unter
www.ultradent.de/de/produkte/behandlungseinheiten**

ULTRADENT
DENTAL UNITS. MADE IN GERMANY.

Ultradent
Dental-Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG

Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunenthal, Germany

Tel.: +49 89 42 09 92-0
Fax: +49 89 42 09 92-50
vertrieb@ultradent.de
kundendienst@ultradent.de
www.ultradent.de