

Top in Form,
Funktion
und Lebensdauer.


synea^{LS}

Hand- und Winkelstücke

NEU
2 JAHRE
GARANTIE



Synea LS – eine Klasse für sich.

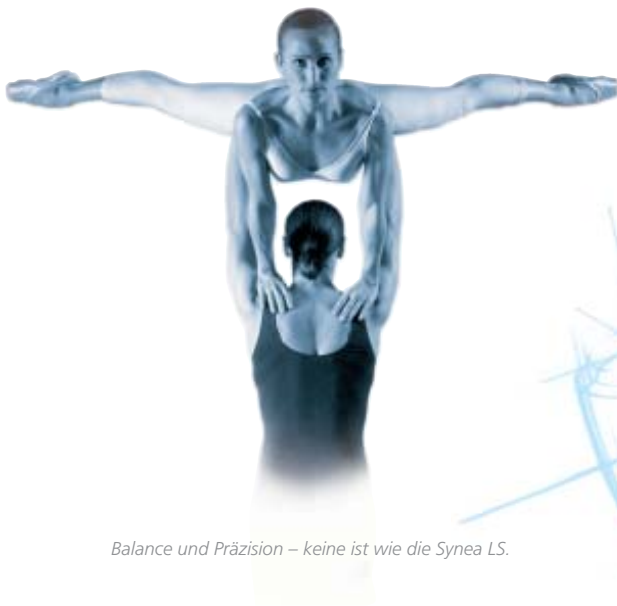

Balance und Präzision – keine ist wie die Synea LS.

Die Hand- und Winkelstückgeneration Synea LS ist gekennzeichnet von innovativer Technik und Formgebung, einem anspruchsvollen Materialkonzept und präziser Verarbeitung. Edelstahl ist der vorherrschende Baustoff. Spezielle Dichtungsmaterialien, Hochleistungswerkstoffe, computeroptimierte Verzahnungen und extrem widerstandsfähige Keramikkugellager beim Schnellläufer WA-99 LT/A garantieren hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer.

Ihre größten Vorteile auf einen Blick:

- optimale Handhabung durch innovative ergonomische Form
- lange Lebensdauer dank hochwertigem Materialkonzept und widerstandsfähigen, langlebigen Keramikkugellagern beim Schnellläufer WA-99 LT/A
- hohes Hygieneniveau durch MONOBLOC-Design
- hervorragende Lichtleistung durch Kompaktglasstab (25.000 Lux)
- optimales Spraysystem
- optimierte, komfortable Druckknopfspannung
- wirtschaftlich in Anschaffung und Instandhaltung
- 2 Jahre Garantie

NEU




Der Schnellläufer im 1.000-Stunden-Test. Der Synea LS Schnellläufer hat sich schon lange profiliert. Nun bestätigt ein Test des Kompetenzzentrums für Tribologie, die AC²T research GmbH*, dass sie auch im Dauerlauf unschlagbar ist. Denn im Zuge des Tests erreichte das WA-99 LT/A als einziges Produkt eine Durchlaufzeit von über 1.000 Stunden ohne einen einzigen Ausfall.

Das Geheimnis dieses Erfolges: die W&H Antriebstechnologie DuraSys, eine spezielle Kombination aus Getriebe-, Lager- und Schmier-technologie, die auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung zahnmedizinischer Instrumente und Geräte basiert.

*Austrian Center of Competence for Tribology.
Tribologie umfasst die Gebiete Reibung, Verschleiß und Schmierung.
Sie zielt auf die funktionelle, ökonomische und ökologische Optimierung von Bewegungssystemen.
Die Umsetzung tribologischer Wissenschaft führt zur Minderung von Verschleiß und Optimierung von Reibungsbedingungen.

Unübertroffen in Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.


Die AC²T research gmbh* stellt in ihrer interdisziplinären Forschungsarbeit ein in Europa nahezu einzigartiges Tribologie-Kompetenzzentrum dar. Und bestätigte darüber hinaus vor kurzem, dass das Winkelstück WA-99 LT/A als einziges Produkt 1.241 Betriebsstunden absolviert hat. Ohne Ausfall. Aber mit gleich bleibender Präzision und Zuverlässigkeit.

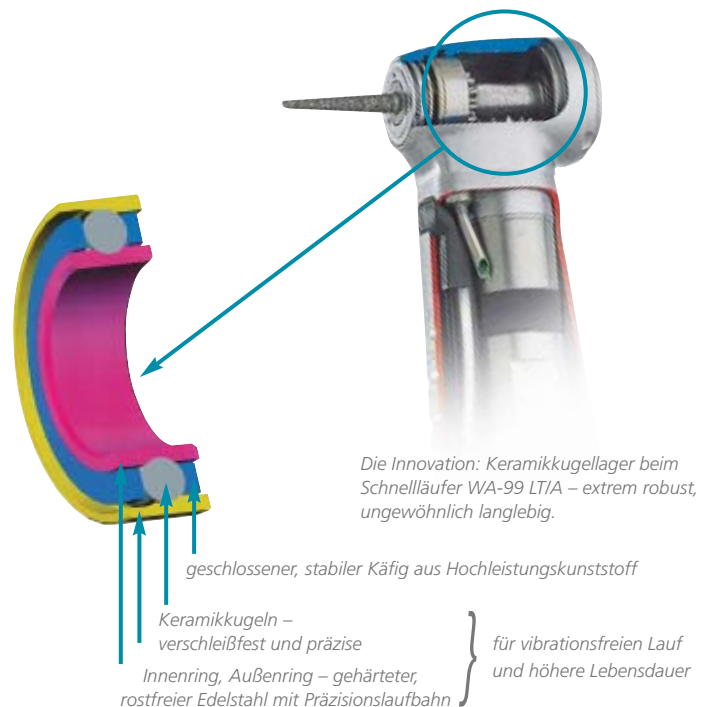

2 Jahre Garantie. **NEU**

Ab sofort gibt W&H auf alle Synea LS-Modelle eine 2 Jahres-Garantie. Auf W&H kann man sich eben wirklich verlassen!

Überzeugende MONOBLOC-Technologie der Synea LS-Serie.

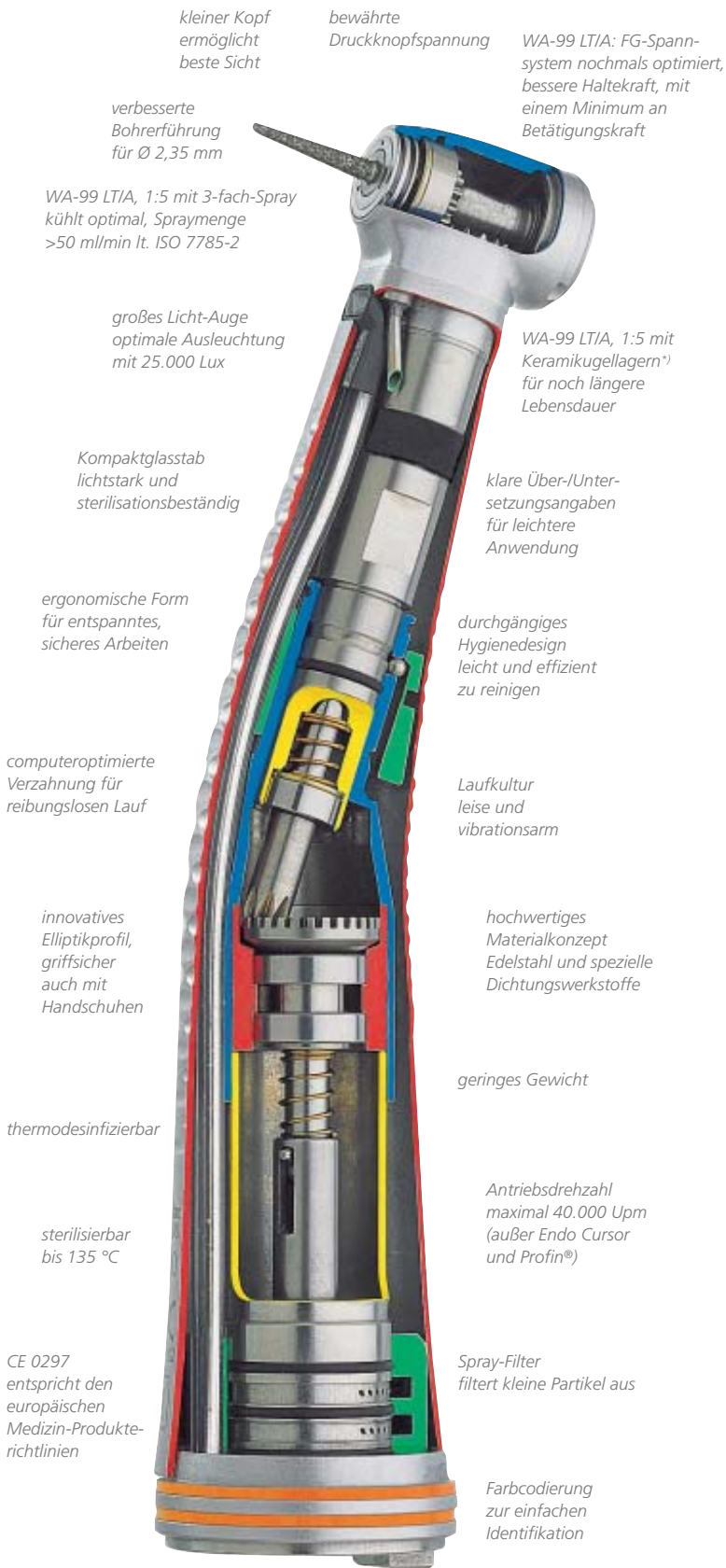

ISO-Kupplung, System LT, DIN 13.940, ISO 3964 passend für alle Motoren mit ISO-Anschluss


*) Nicht in allen Ländern erhältlich.

Mit Sicherheit spannend! Die komfortable W&H-Druckknopfspannung wurde nochmals optimiert. Verstärkte Haltekraft und ein Minimum an Betätigungskraft beim Bohrerwechsel bedeuten ein weiteres Plus an Bedienungskomfort und Sicherheit.



Bohrerwechsel auf Knopfdruck – einfacher geht's nicht!

Einfach perfekt. Die Synea LS-Reihe ist perfekt auf ein breites Anwendungsspektrum abgestimmt. Drei Instrumente (1:5, 1:1, 10:1) reichen aus, um den Drehzahlbereich von ca. 200-200.000 Upm abzudecken. Ökonomisch in Anschaffung und Instandhaltung, überraschend einfach in der Anwendung – das überzeugt!

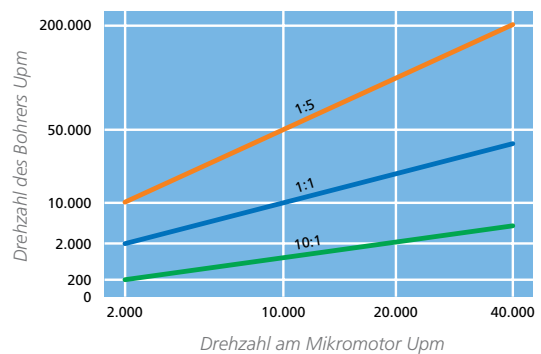

synea

Funktion und Design im Dialog.

Funktionalität und Formschönheit gehören zu den auffallendsten Kennzeichen der Synea LS-Reihe. Die ergonomische Form mit den präzise aufeinander abgestimmten Winkeln überzeugt durch hervorragende Balance. Das Elliptik-Griffprofil gewährleistet sichere Führung – auch mit Handschuhen oder bei feuchter Oberfläche. Das geringe Gewicht ermöglicht ein entspanntes, ermüdungsfreies Behandeln.

Erfrischend bis ins Detail.

Für optimale Zerstäubung und somit kontinuierlich perfekte Kühlung sorgt der integrierte 3-fach-Spray mit wartungsfreiem Filter beim Schnellläufer WA-99 LT/A.

Im Zusammenspiel für das perfekte Ergebnis.

Das große Lichtauge der Synea LS leuchtet mit 25.000 Lux präzise auf die Behandlungsstelle. So werden selbst kleinste Details deutlich sichtbar. Dafür sorgt der einzigartige Kompaktglasstab – auch nach vielen tausend Sterilisationen.



Großes Licht, kleiner Kopf, geringes Gewicht – drei Details, die sich täglich positiv bemerkbar machen.



Monobloc – eine saubere Vorstellung.

Dank Monobloc-Design erreicht die Synea LS ein Hygieneniveau ersten Ranges. Damit unterscheidet sie sich maßgeblich von Instrumenten mit Wechselskopfsystem.

Die glatte durchgängige Edelstahlhülse mit dem Elliptik-Griffprofil ist leicht und effizient zu reinigen.

Die Synea LS ist sterilisierbar bis 135° C und thermodesinfizierbar. Oberfläche, Innenteile und Dichtungen



zeigen sich selbst nach zahllosen Sterilisationen von ihrer besten Seite.



Synea LS – eine Übersicht.



WA-99 LT / WA-99 A

Schnelllauf-Winkelstück, 1:5, 3-fach-Spray, für FG-Bohrer Ø 1,6 mm,
– Präparation von Kronenstümpfen und Kavitäten, Trepanieren, Resezieren,
Finieren, Entfernen von Füllungen und Metallen



WA-62 LT / WA-62 A

Endo Cursor-Winkelstück, 4:1, 1-fach-Spray, für Hand-Wurzelkanal-
instrumente Ø 3,6 - 4 mm
– mechanische Wurzelkanalaufbereitung mit alternierender Drehbewegung
(ca. 60°) – Antrieb max. 6.000 Upm



WA-56 LT / WA-56 A

Winkelstück, 1:1, 1-fach-Spray, für Winkelstückbohrer Ø 2,35 mm,
– Kavitätenpräparation, Trepanieren, Resezieren, Separieren, Finieren von
Kavitätenrändern und Füllungen



**WA-67/1,1 LT, WA-67/0,4 LT
WA-67/1,1 A, WA-67/0,4 A**

Profin®-Winkelstück, 2:1, 1-fach-Spray, Hub 1,1/0,4 mm für Dentatus-Tips,
– Entfernung von Überschüssen des Füllungsmaterials und Zements,
Vorpolieren, Feinpolieren, Aufpolieren im Interdental- und Subgingival-
Bereich, Antrieb max. 20.000 Upm



WA-66 LT / WA-66 A

Untersetzungs-Winkelstück, 2:1, 1-fach-Spray, für Winkelstückbohrer
Ø 2,35 mm
– Exkavieren, Präparation in Pulpanähe, Finieren



HA-43 A

Handstück, 1:1, 1-fach-Spray, für Hand- und Winkelstückbohrer Ø 2,35 mm
– Präparieren, Separieren, Trepanieren, Resezieren im Frontzahnbereich



WA-86 LT / WA-86 A

Untersetzungs-Winkelstück, 10:1, 1-fach-Spray, für Winkelstückbohrer
Ø 2,35 mm
– Exkavieren, Präparation in Pulpanähe, Wurzelkanalfüllung, Zementieren

LT = Winkelstücke mit Licht

A = Hand- und Winkelstücke ohne Licht

*) Nicht in allen Ländern erhältlich.

Technisch perfekte Lösungen von W&H.

Bestellen Sie W&H Synea LS Hand- und Winkelstücke über
Ihren Fachhändler.



DENTALWERK



ISO 13485
Annex II
93/42/EWG
EC 0297

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Austria, A-5111 Bürmoos

✉ Postfach 1, Ignaz-Glaser-Straße 53

☎ +43/62 74/62 36-0

@ office@wh.com

☎ +43/62 74/62 36-55

🌐 wh.com